



## Complete Home Alerting Solution

### HA360MVS

## Main Alerting Unit with Bed Shaker Smoke / CO Detection



Copyright © 2015 Sonic Alert. All right reserved.

# TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions.....	1
Product Description .....	4
HomeAware™ Features .....	4
Package Contents .....	5
Identification Features – Front.....	6
Identification Features – Back .....	7
Setting Up Your Main Unit for the First Time .....	8
Getting Started / Time and Alarm Settings... ..	9
Setting Alarm 1 .....	9
Setting Alarm 2.....	9
Turning Off Alarm .....	10
Snooze and Alarm Duration .....	11
Flash, Audio and Vibrator Alarm Settings.....	12
Alarm 1 – Setting Flash Alarm Options.....	12
Alarm 1 – Setting Audio Alarm Options .....	12
Alarm 1 – Setting Vibrator Alarm Options.....	13
Alarm 2 – Setting Alarm Options .....	13
Test Mode - Testing Flash, Audio, Vibrator and Lamp .....	13
Select 12 or 24 Hour Mode.....	14
Speaker Volume and Tone Settings .....	14
Auto Dimmer and Alert Settings .....	15
Language Settings and Removing a Linked Device .....	16
Battery Back Up .....	17
USB Charging .....	18
Vibrator / Bed Shaker .....	19
Smoke / CO Alert .....	19
Telephone Alert for Landline Phones .....	20
Optional Accessories.....	20
Regulatory Compliance .....	21
General Data .....	22
Warranty.....	23

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using your HomeAware™ HA360MVSBS, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons including the following:

1. Read and understand all instructions, if there is something you do not understand please call our customer service.
2. Do not use any electrical product near a bathtub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or close to a swimming pool or anywhere else there is water.
3. Do not use a telephone anywhere near a gas leak.
4. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during a storm. There may be a risk of electrical shock from lightning and electrical storms.
5. Always unplug this product from the wall power outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the product. Use a damp cloth for cleaning only.
6. Always place this product on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the product falls.
7. Do not cover slots, vents or openings on this product. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
8. Always operate this product using electrical voltage as specified on the base unit or in the user guide. If you are not sure of the voltage in your home, consult your dealer or local power company.
9. Do not place anything on the power cord. Install the product where no one will step or trip on the cord.
10. Never push any objects through the slots in the product. They can touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the product
11. Do not overload wall outlets or extension cords as this can increase the risk of fire or electrical shock.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Continued**

12. Unplug this product from the wall outlets and refer servicing to the manufacturer under the following conditions:
  - A. When power cord or plug is damaged or frayed.
  - B. If water or liquid has been spilled into or on the product.
  - C. If the product has been exposed to rain or water.
  - D. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment may require extensive work by a qualified technician.
  - E. If the product has been dropped or if the case has been damaged in anyway.
13. To reduce the risk of electrical shock, do not take this product apart. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
14. Never install telephone wiring during a lightning storm.
15. Never install telephone jacks in damp or wet areas.
16. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line and power supply have first been disconnected.
17. Always use caution when installing or modifying telephone lines.
18. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
19. This product should not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on or near the product.
20. Batteries shall not be exposed to excessive heat, such as sunshine or fire or any other heat source.
21. The Main unit's power supply plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



## **PRODUCT DESCRIPTION**

Sonic Alert's HomeAware™ Complete Home Alerting Solution is the first of its kind to incorporate supervised safety, security and peace of mind. Sonic Alert has developed industry leading technology with its proprietary TruAlert™. TruAlert™ D-RF networking provides the latest in wireless technology and is on guard constantly, searching for any problems 24/7. These potential problems will be reported on its large, bright red display and in easy to see text.

With TruAlert™ networking you'll feel safe and secure knowing your system is monitoring itself every 2-3 minutes 24/7 even in the event of a power failure.

HomeAware™ with TruAlert™ networking will alert you to a landline telephone, cell phone, video phone, and the doorbell ringing. HomeAware™ comes complete with a doorbell transmitter, powerful bed shaker, extra loud dual alarm with up to 105 decibels, an extra bright flashing xenon strobe and a convenient USB cell phone charger.


## **HOMEAWARE™ FEATURES**

- TruAlert™ D-RF safe & secure 24/7 networking technology.
- Water resistant doorbell transmitter with extended range.
- Powerful Sonic Alert bed shaker.
- Scrolling caller ID and alert messages are shown on its bright red, large 2" display.
- Extra bright strobe flasher.
- Dual alarm clock with alarm and snooze duration, auto dimming, scrolling display.
- Alarm with up to 105 decibels of loud sound.
- USB outlet for Smartphone charging.
- Telephone alert for landline phones, faxes and video phones, RJ11 interface.
- Test mode to test alarm functions.
- Smart extended battery backup, up to 72 hours of backup with regular AA alkaline type.


# PACKAGE CONTENTS



1. HomeAware™ – Main Unit
4. Vibrator/Bed Shaker
5. Telephone Line Cord
- ..6 Power Supply Adapter

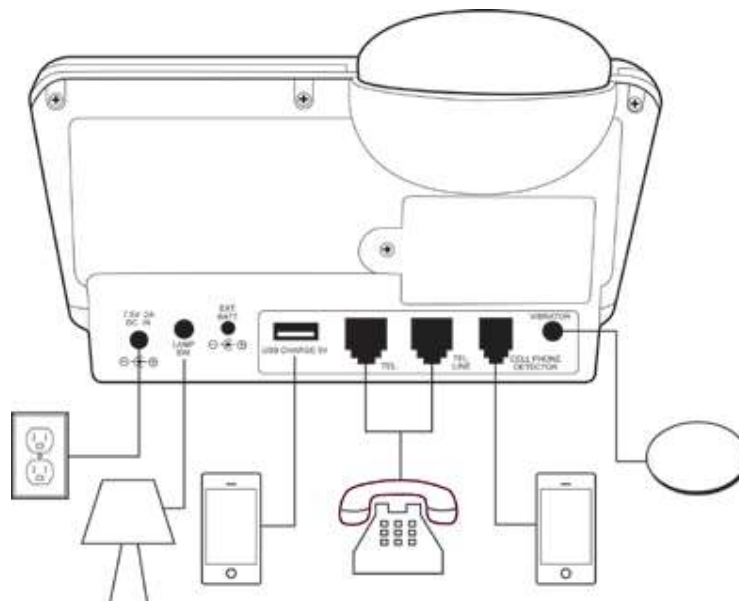


## IDENTIFICATION FEATURES - FRONT

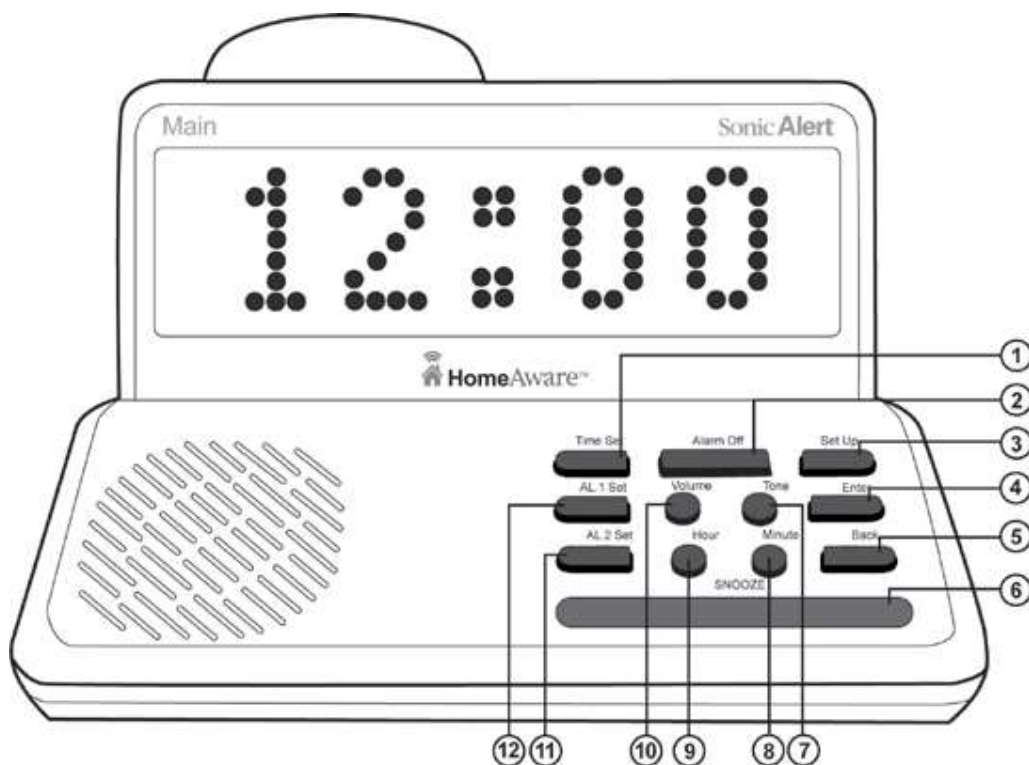

1. Time Set
2. Alarm Off
3. Set Up
4. Enter
5. Back
6. SNOOZE
7. Tone
8. Minute
9. Hour
10. Volume
11. AL.2 Set
12. AL.1 Set

## IDENTIFICATION FEATURES – BACK

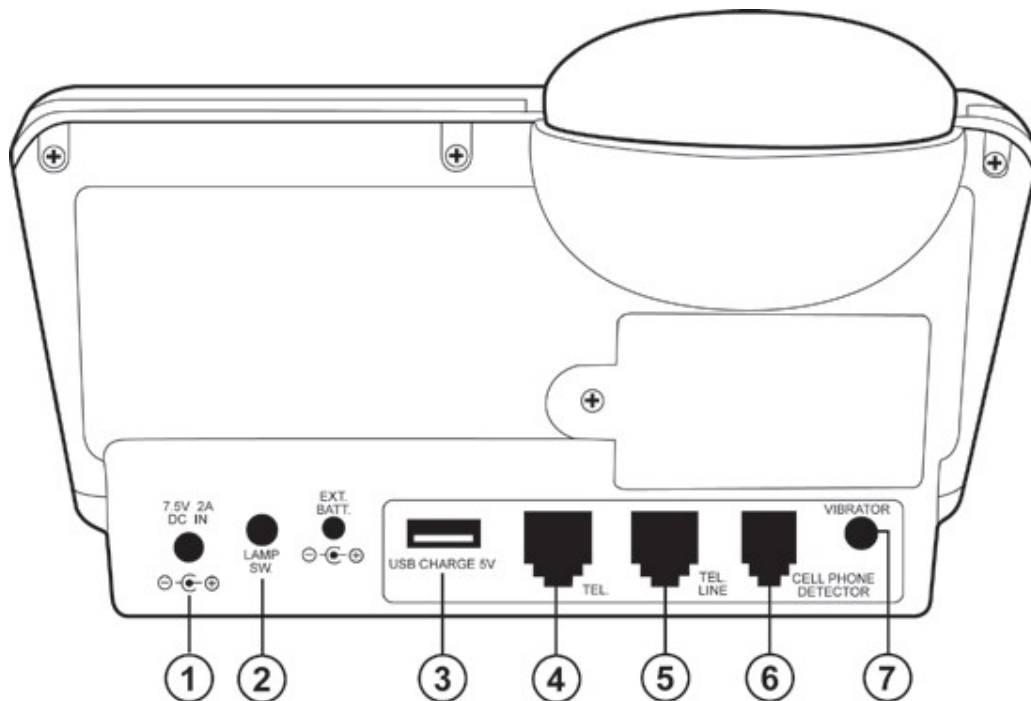

1. POWER SUPPLY INPUT 7.5V 2A DC IN
2. LAMP SWITCH / BRIDGE UNIT (Optional)
3. USB CHARGE 5V
4. TEL.
5. TEL. LINE
6. CELL PHONE DETECTOR (Optional)
7. VIBRATOR/BED SHAKER


# SETTING UP YOUR MAIN UNIT FOR THE FIRST TIME

## What Is Included With Your HomeAware™:

1. HomeAware™ – Main Unit
2. Doorbell Transmitter
3. Doorbell Transmitter Chime Box Connector Cable
4. Vibrator/Bed Shaker
5. Telephone Line Cord

## Out of Box First Time Use

1. Remove all contents of the box. Make sure items 1 through 5 are all available, as listed above.
2. Plug in the power supply (see diagram below 7.5V 2A DC IN). Observe the correct color coding on the back of the unit and on the back of the power supply. Note: If using a remote receiver the color for the Main unit and remote receiver unit will be different colors.

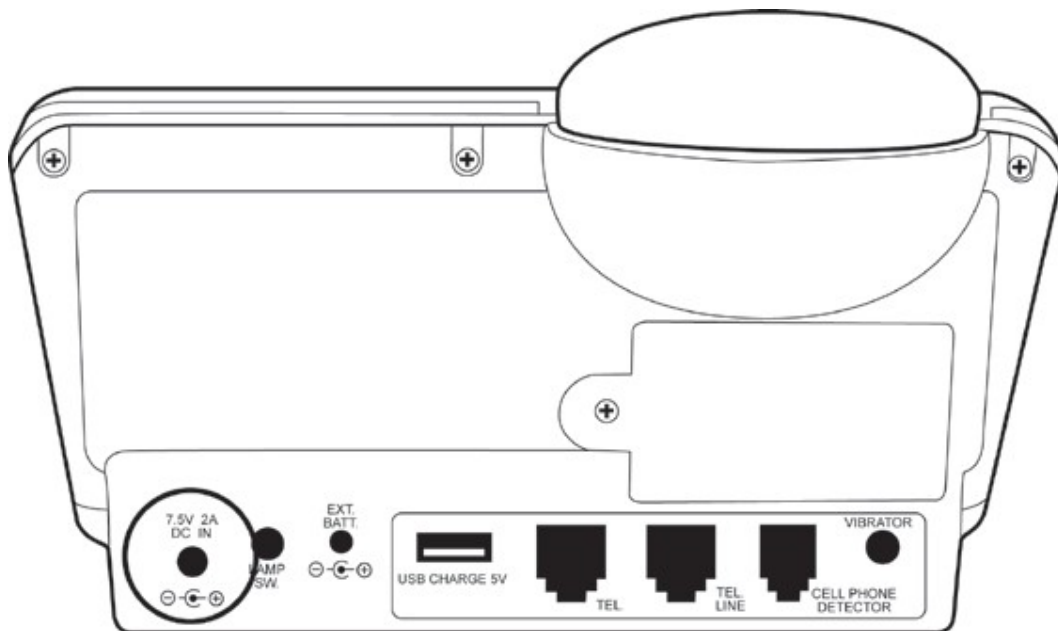

# GETTING STARTED

## TIME AND ALARM SETTINGS

### Setting the Time of Day

1. Press the **Time Set** button. Blinking red dots shown on the display indicate time set mode has been activated.
2. Press the **Hour** buttons up or down and the **Minute** buttons up or down to set desired time. The PM indicator is located on the top left hand side (see diagram next page).
3. Press the **Enter** button when done to complete time setting.
  - Display dots will stop blinking to indicate time has been set.

### Setting Alarm Times - there are two alarms AL.1 and AL.2.

#### Setting Alarm 1

1. Press and hold **AL.1 Set** button. Blinking red dots shown on the display indicate alarm set mode has been activated.
2. Press the **Hour** buttons up or down and the arrow **Minute** buttons to set desired alarm time.
3. Press the **Enter** button when done to complete, a red LED light will appear on the display's left side indicating alarm 1 is now set (see diagram next page).


#### Setting Alarm 2

Follow the same steps for AL.1 above to set AL.2. AL.2 will have its own indicator light also located on the left as A2.

# TIME AND ALARM SETTINGS Continued

## Turning Off Alarm

To turn off alarm AL.1 or AL.2 press **Alarm Off** or **SNOOZE** button (see setting up **SNOOZE** following page).

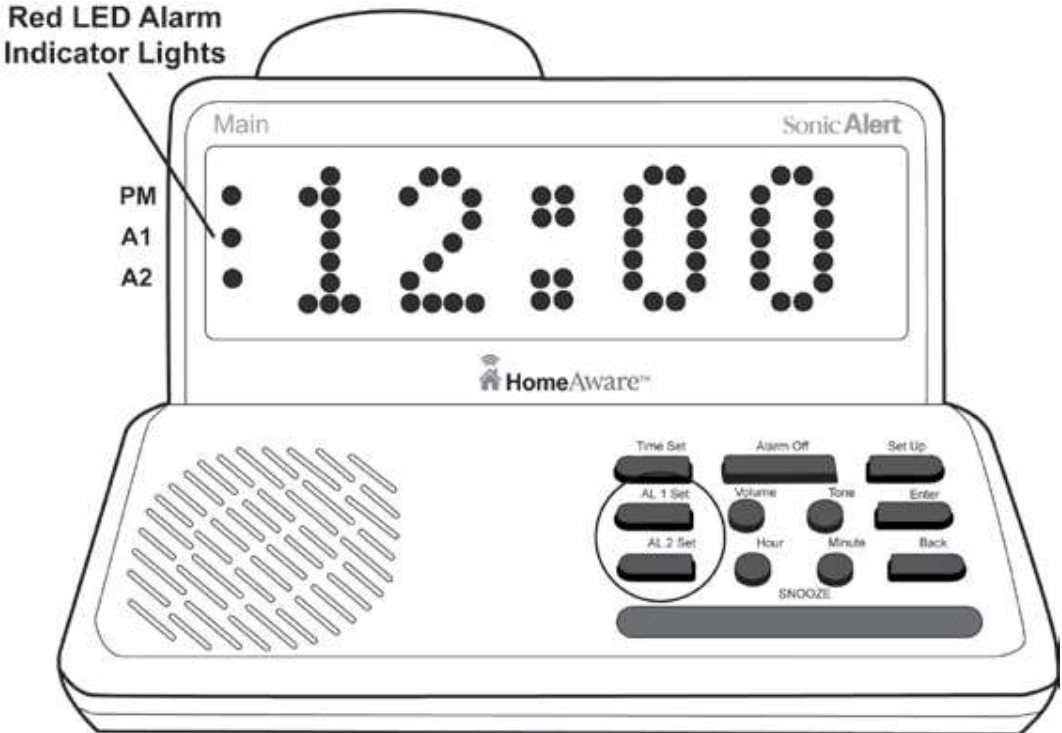

# SNOOZE AND ALARM DURATION

## Setting Alarm Duration

Alarm duration will allow you to select the length of time that the alarm will run (5 min to 30 min).

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**, the word **ONTIME** will be shown on the display, press **Enter**.
3. Press the **Tone** button to set the desired alarm duration (5 min – 30 min) and press **Enter** to complete alarm duration setting.

## Setting Snooze Duration

Snooze duration will allow you to select the length of time that the snooze alarm will run (5 min to 30 min).

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**, the word **ONTIME** will be shown on the display
3. Press the **Tone** button until the word **SNOOZE** is displayed, press **Enter**. The default snooze duration is set for 10 minutes if this is your desired snooze duration press **Enter**. If you would like a shorter or longer snooze duration (5 min to 30 min) press the **Tone** button to toggle until desired snooze duration is displayed and press **Enter**.



# FLASH, AUDIO AND VIBRATOR ALARM SETTINGS

## Alarm1 – Setting Flash Alarm Options

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**.
3. Press the **Tone** button until the word **ALARM1** is shown on the display.
4. Press the **Enter** button and the word **FLASH** will be shown on the display.
5. Press the **Enter** button and the word **ON** will be shown on the display.
6. Press the **Tone** button to toggle between **ON** or **OFF**, press **Enter** on your selection.

## Alarm1 – Setting Audio Alarm Options

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**.
3. Press the **Tone** button until the word **ALARM1** is shown on the display.
4. Press the **Enter** button and the word **FLASH** will be shown on the display.
5. Press the **Tone** button and the word **AUDIO** will be shown on the display, press **Enter**.
6. Press the **Tone** button to toggle between **ON** or **OFF**, press **Enter** on your selection.

## FLASH, AUDIO AND VIBRATOR ALARM SETTINGS Continued

### Alarm1 – Setting Vibrator Alarm Options

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**.
3. Press the **Tone** button until the word **ALARM1** is shown on the display.
4. Press the **Enter** button and the word **FLASH** will be shown on the display.
5. Press the **Tone** button until the word **VIBR** is shown on the display, press **Enter**.
6. Press the **Tone** button to toggle between **ON** or **OFF**, press **Enter** on your selection.
7. While in the Set Up mode, the alarm indicators on the right side will light up showing the alert options chosen (sound, flash, and vib).

### Alarm2 – Setting Alarm Options

Follow the same steps above when setting **ALARM2**.

### Test Mode (Testing Flash, Audio, Vibrator and Lamp)

1. Press **Enter** and **Back** buttons together, the word **TEST** will be shown on the display. The audio, vibrator, strobe and lamp flash will be activated, so you will be assured that all three alerts are working.
2. Press and hold the **SNOOZE** button for 2 seconds to complete test mode.

## 12 OR 24 HOUR MODE AND VOLUME / TONE SETTINGS

### Select 12 or 24 Hour Mode

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**.
3. Press the **Tone** button until **12 / 24** is shown on the display, press **Enter**.
4. Press the **Tone** button to toggle between **12 HR** and **24 HR**, press **Enter** on your selection.

### Speaker Volume and Tone Setting

1. Press the **Volume** up and the **Hour** down buttons to select the preferred volume level. There are 8 volume levels and an OFF level to completely turn off the sound.
2. Press the **Tone** up and the **Minute** down buttons to select the preferred tone level. There are 15 different tones to select from.

## AUTO DIMMER AND ALERT SETTINGS

### Automatic Display Dimmer

The HomeAware™ has a built in auto dimmer. It will automatically dim when the room gets darker. The auto dimmer can also be turned off and will stay bright even when the room gets dark.

### Turning Off the Automatic Dimmer

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display.
3. Press the **Tone** button until the word **DIM** is shown on the display, press **Enter**.
4. Press the **Tone** button to toggle between **ON** or **OFF**, press **Enter** on your selection.

### Alerts Option (Number of Alerts)

The HomeAware™ has alert options that will let the user pick how many times they will be alerted 3, 6 or 9 times.

### Setting the Alerts Option

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button until the word **ALERTS** is shown on the display, press **Enter**.
3. Press the **Tone** button to toggle between **3**, **6**, or **9**, press **Enter** on your selection.

# LANGUAGE SETTINGS AND REMOVING A LINKED DEVICE

## Language

The HomeAware™ can be set to display three different languages, English, Spanish or French.

## Setting Language Preference

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display.
3. Press the **Tone** button until the word **LANG** is shown on the display, press **Enter**.
4. Press the **Tone** button to toggle between **ENG**, **ESP** or **FRA**, press **Enter** on your selection.

## Removing a Linked Device


When a linked device needs to be removed (replacing an existing device with a new one or a device has been lost)

1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display.
3. Press the **Tone** button until the word **REMOVE** is shown on the display, press **Enter**.
4. Press the **Tone** button to toggle between devices, press **Enter** on your selection.

# BACKUP BATTERY

## Battery Back Up

1. To set up battery backup unplug the Main unit from the 120v power supply.
2. Install 5 new AA alkaline batteries in battery compartment located on the bottom of the Main unit.
3. The LED display will be dimmed when running on the battery backup only. Upon any alert such as doorbell or telephone the display will be at its maximum brightness. After any alert the display will go dim again to help conserve battery power.

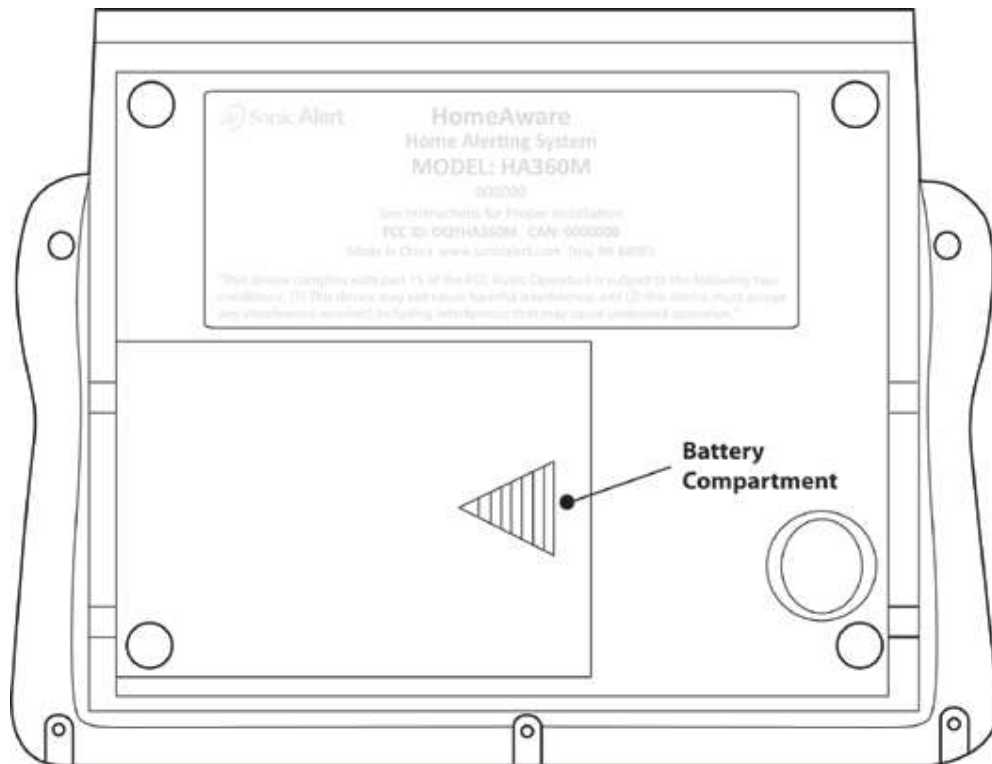


# USB CHARGING

## USB Charging

The HomeAware™ is equipped with a convenient USB charging port on the back panel that allows you to recharge many brands of mobile phones, portable music players, and other handheld devices that are supplied with USB charging cables, tablets not included.

To charge your device, connect a USB charging cable that was supplied with your device to the USB charging port on the back of the Main unit. Observe the charging indicator on your device to confirm that it is charging. Note: Charging time will vary depending on the current that your device requires. Therefore some devices will take longer to charge than others.

\*The HomeAware™ USB charger handles 5 volt devices only. It will not charge an iPad® or tablet.

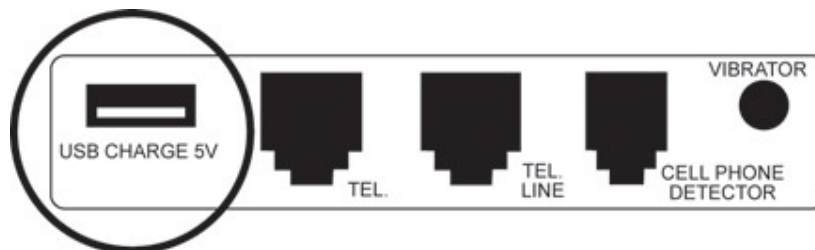

## **VIBRATOR / BED SHAKER**

### **Vibrator/Bed Shaker**

Your HomeAware™ comes with a powerful vibrator/bed shaker. This powerful vibrator/bed shaker is most effective when placed between the mattress and box spring or under a pillow. This feature is a great way to wake up as it requires no loud sound that can wake others. This bed shaker can be programmed to shake for the alarm clock alert, or for all alerts including baby cry, doorbell, smoke / CO, and telephone alerts.

To setup the vibrator/ bed shaker simply plug the vibrator into the back of the HomeAware™ where it says vibrator.

## **SMOKE / CO ALERT**

The HomeAware™ will alert you to the sounds produced by the smoke and CO detectors already installed in your home.

### **Detecting the Different Alert Sounds**

The Main Unit detects loud sounds and will alert you to the source of that sound. If it detects a loud sound from a smoke detector that meets the T3 standard used for SMOKE DETECTORS, “SMOKE” will scroll on the display of the HomeAware™ Main Unit.

If it detects a loud sound from a CARBON MONOXIDE (CO) DETECTOR that meets the T4 standard, “CO” will scroll on the displayed of the HomeAware™ Main Unit.

### **For All Other Sounds**

If a loud sound is detected that does NOT match the T3 or T4 standard, then “ALERT” will scroll on the HomeAware™ Main unit in a loud, repeating pattern.



## TELEPHONE ALERT FOR LANDLINE PHONES

The HomeAware™ has the capability to alert you to a standard land line telephone. Follow the steps below to install a telephone to the HomeAware™.

1. Place the HomeAware™ Main unit close to a RJ11 standard telephone wall jack. If the provided telephone line cord is not long enough to reach the HomeAware™ you will need to either move the HomeAware™ closer to the input jack or purchase a longer line cord.
2. Plug the phone line cord into the RJ11 wall jack.
3. Plug the opposite end of the phone line cord into the back of the HomeAware™ where it says **TEL LINE**. You are now ready to receive alerts for all phone calls coming in from this phone.
4. You can also utilize the HomeAware™ to add a phone to its input jack on the back of the unit. Simply plug your phone into the back where it says **TEL** your landline phone is now ready to make and receive calls.

## OPTIONAL ACCESSORIES

- HomeAware™ extended range Deluxe Remote Receiver's provide notification with a powerful xenon strobe flasher, and the first of its kind scrolling text display.
- HomeAware™ Basic Receiver is a more cost effective solution for those on a budget.
- Smoke and CO (carbon monoxide) Detection Transmitters.
- Baby Cry monitoring Transmitter.
- Smartphone calls and personal paging of all push alerts from HomeAware™. Your smartphone application will provide alerts from your HomeAware™ system right on your smartphone (Baby, Smoke, Call, Door, etc.).
- SonicBridge™ allows the HomeAware™ to link with any traditional Sonic Alert remote receivers, while also providing for a personal lamp flasher.

# **REGULATORY COMPLIANCE**

## **PART 68 OF FCC RULES INFORMATION**

The HA360MVSBSB complies with Part 68 of FCC Rules. You must, upon request, provide the FCC registration number and REN to your local phone company. Both numbers are shown on the HA360MVSBSB's rating label.

## **PART 15 OF FCC RULES INFORMATION**

The HA360MMVSBSB complies with part 15 of the FCC rules, and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions; (1) This device might not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide responsible protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not interfere in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- i. Reorient or relocate the receiving antenna.
- ii. Increase the separation between the equipment and receiver.
- iii. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- iv. Consult the dealer or an experienced radio /TV technician for help.

Modification not expressly approved by the manufacturer and could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

## GENERAL DATA

UL listed Power Adaptor: AC100-240V~, 50/60Hz  
Power Consumption: Adaptor Output: DC7.5V 2A

 <p>The Lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of dangerous voltage inside the product.</p>	<p><b>CAUTION:</b> TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) FROM THE PRODUCT. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO YOUR SONIC ALERT DEALER.</p>	 <p>The exclamation mark within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.</p>
--	--	--

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

## GENERAL DATA Continued

- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.



- This indicating separate collection for electrical and electronic equipment.

### SONIC ALERT'S 1 YEAR LIMITED WARRANTY

The HomeAware™ HA360MVSBS is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. Within this period Sonic Alert will repair or replace at our option the HomeAware™ HA360MVSBS without charge for parts and labor.

Simply contact our customer service department to obtain an RA (return authorization number) and instructions on how to process your product for return. Call 1-888-864-2446 or e-mail to [RMA@sonicalert.info](mailto:RMA@sonicalert.info). You'll need a copy of your receipt to process the return authorization.

**Sonic Alert Warranty Center**  
**1081 West Innovation Dr. Kearney, MO 64060, USA.**




**Made in China**  
**Sonic Alert, Troy, MI 48083**  
**www.SonicAlert.com 1-888-864-2446**



**Solución completa de alertas en el hogar**

**HA360MVS  
Unidad Principal de Alertas con  
Detección de humo / CO**

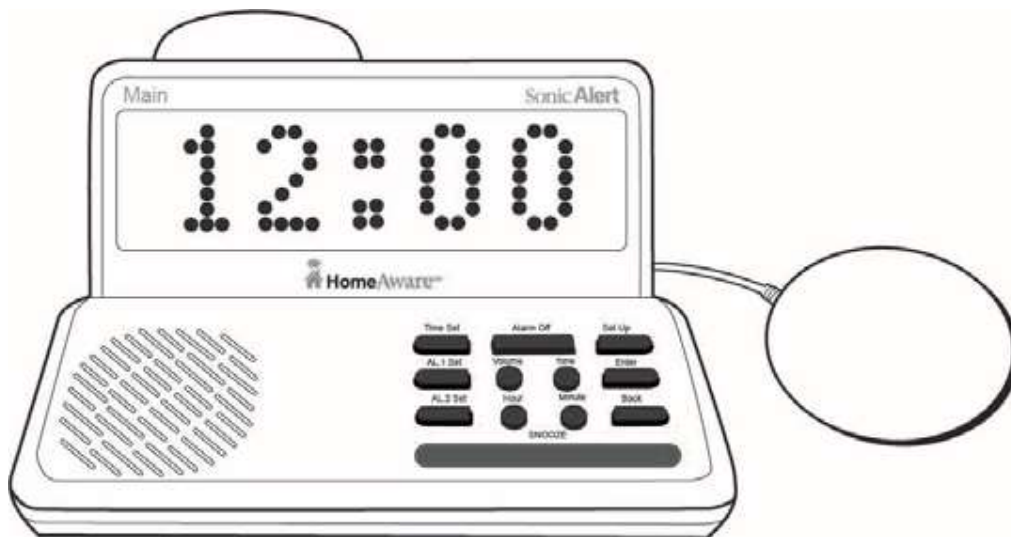

Copyright © 2015 Sonic Alert. Todos los derechos reservados.  
Copyright © 2015 Sonic Alert. All right reserved.

# Contenido

Instrucciones de seguridad importantes .....	
Descripción del producto .....	4
HomeAware™ Características .....	4
Contenido del paquete .....	5
Características de identificación – Frontal.....	6
Características de identificación – Atrás.....	7
Configuración de la unidad principal por primera vez.....	8
Primeros pasos / Ajustes de hora y alarma .....	9
Ajuste de la alarma 1.....	9
Ajuste de la alarma 2.....	9
Desactivación de la alarma .....	0
Snooze y duración de la alarma .....	11
Ajustes de alarma de flash, audio y vibrador.....	12
Alarma 1 - Configuración de las opciones de alarma de flash.....	12
Alarma 1 - Configuración de las opciones de alarma de audio .....	12
Alarma 1 - Configuración de las opciones de alarma del vibrador .....	13
Alarma 2 - Configuración de las opciones de alarma .....	13
Modo de prueba - Prueba de flash, audio, vibrador y lámpara.....	13
Seleccione el modo 12 o 24 horas .....	14
Ajustes de volumen y tonos del altavoz .....	14
Ajustes de atenuador automático y alertas.....	15
Configuración del idioma y eliminación de un dispositivo vinculado.....	16
Batería de respaldo .....	17
Carga USB .....	18
Vibrador / agitador de cama .....	19
Alarma de humo / CO.....	19
Alerta telefónica para teléfonos fijos.....	20
Accesorios opcionales.....	20
Cumplimiento normativo.....	21
Datos generales .....	22
Garantía .....	23

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Cuando utilice su HomeAware™ HA360MVSB, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para así reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:

1. Lea y comprenda todas las instrucciones, si hay algo que no entiende por favor llame a nuestro servicio al cliente.
2. No utilice ningún producto eléctrico cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o en cualquier otro lugar donde hay agua.
3. No utilice un teléfono en ningún lugar cercano a una fuga de gas.
4. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta. Pudiera existir un riesgo de descarga eléctrica de un rayo y de tormentas eléctricas.
5. Desconecte siempre el producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol sobre el producto. Utilice para limpiar solamente un paño húmedo.
6. Siempre coloque este producto sobre una superficie estable. Si el producto se cae podría dar lugar a daños y/o lesiones graves.
7. No cubra ranuras, orificios de ventilación y aberturas del producto. Este producto nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuente de calor. Este producto no debe ser colocado en una instalación integrada salvo que posea la ventilación adecuada.
8. Siempre opere este producto utilizando la tensión eléctrica especificada en la unidad base o en el manual del usuario. Si no está seguro del voltaje de su hogar, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.
9. No coloque nada sobre el cable de alimentación. Instale el producto de manera que nadie pise ni tropiece con el cable.
10. Nunca introduzca objetos por las ranuras en el producto. Ellos pueden tocar puntos de voltajes peligrosos o producir cortocircuitos que podrían resultar en riesgo de incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
11. No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión ya que esto puede aumentar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

# **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

## **Continuación**

12. Desenchufe este producto de las tomas de corriente y refiera el servicio poniéndose en contacto con el fabricante bajo las siguientes condiciones:
  - A. Cuando el cable de corriente o la toma estén dañados o deshilachados.
  - B. Si el agua o algún líquido han sido derramados dentro o sobre el producto.
  - C. Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
  - D. Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de funcionamiento. El ajuste inadecuado puede requerir la intervención de un técnico cualificado.
  - E. Si el producto se ha caído o si en cualquier caso que haya sido dañado de todos modos.
13. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no debe desarmar este producto. Si abre o retira las cubiertas puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un montaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas al volver a utilizar el aparato.
14. Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
15. Nunca instale conectores telefónicos en lugares húmedos o mojados.
16. Nunca toque los cables telefónicos o terminales sin aislante a menos que la línea telefónica y la fuente de alimentación hayan sido desconectadas previamente.
17. Siempre tenga cuidado al instalar o modificar las líneas telefónicas.
18. Utilice sólo el cable de corriente y las pilas indicadas en este manual. Nunca arroje las baterías al fuego. Pueden explotar. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones especiales de eliminación.
19. No se debe exponer este producto a goteo o salpicado y ningún objeto lleno de líquidos, como floreros, deberá colocarse sobre el producto.
20. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar directa o fuego o cualquier otra fuente de calor.
21. El enchufe de alimentación de potencia de la unidad principal se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo deberá estar siempre operable.



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La solución completa de alertas en el hogar Sonic HomeAware™ es la primera de su clase en incorporar protección supervisada, seguridad, y tranquilidad. Sonic Alert ha desarrollado una tecnología líder en la industria con sus dispositivos propietarios TruAlert™.


Con la red TruAlert™ se sentirá protegido y seguro sabiendo que su sistema está monitoreándose cada 2-3 minutos 24/7, incluso en caso de cortes de corriente.

El HomeAware™ con las redes TruAlert™ le alertará a un teléfono fijo, teléfono celular, teléfono de video, y con el timbre de la puerta sonando. HomeAware™ viene completo con un transmisor del timbre de la puerta, un potente agitador de cama, una alarma fuerte extra dual de hasta 105 decibelios, un xenón extra con luz brillante parpadeante estroboscópica y un conveniente cargador USB para el teléfono celular.

## CARACTERÍSTICAS del HOMEAWARE™


- TruAlert™ D-RF protección y seguridad 24/7 utilizando tecnología de redes.
- Luz de Xenón intermitente extra brillante estroboscópica.
- Alarma con hasta 105 decibelios de sonido fuerte.
- Potente vibrador de cama Sonic Alert.
- Desplazamiento identificador de llamadas y mensajes de alerta los cuales se muestran en la pantalla grande de 2", .brillante de color rojo.
- Alerta telefónica para teléfonos fijos, faxes y teléfonos de video, interfaz RJ11.
- Reloj despertador con alarma dual y duración de repetición, oscurecimiento automático, y desplazamiento de la pantalla.
- Modo de prueba para probar las funciones de la alarma
- El set Principal incluye un timbre transmisor de puerta resistente al agua con rango extendido.
- Salida USB para la carga de Smartphone.
- Respaldo extendido inteligente de la batería, de hasta 72 horas de respaldo con baterías alcalinas de tipo AA.

# CONTENIDOS DEL EMPAQUE

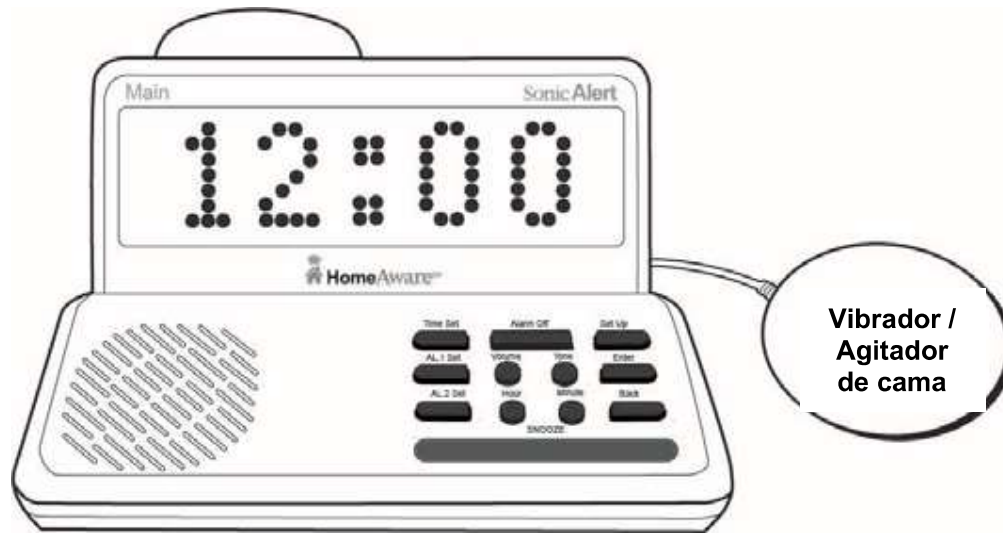


Unidad principal

1. HomeAware™ - Unidad principal
2. Transmisor del timbre de la puerta
3. Cable conector del transmisor del timbre de la puerta al carillón
4. Vibrador / Agitador de cama
5. Cable de la línea telefónica

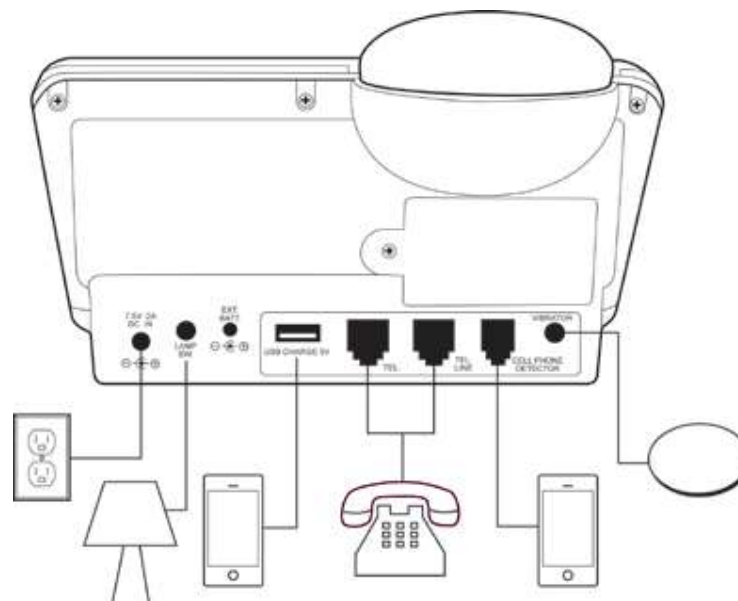


# CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN – FRENTE

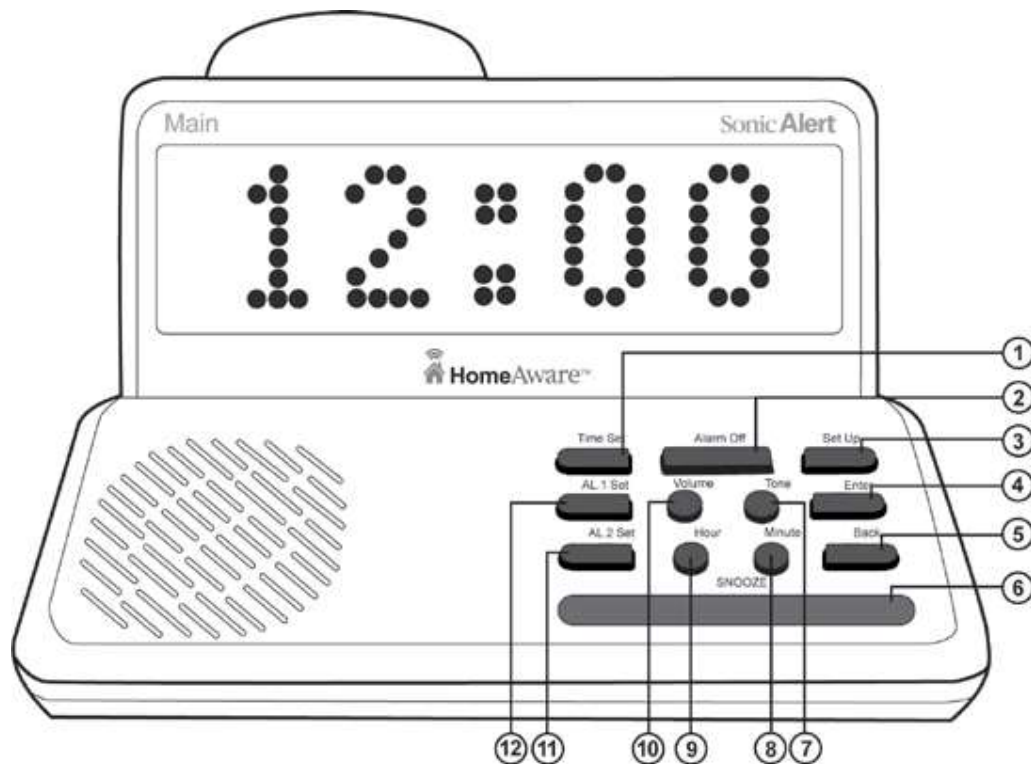

1. Configurador de Hora
2. Apagado de la alarma
3. Configuración
4. Ingresar
5. Retroceder
6. REPOSO
7. Tono
8. Minutos
9. Hora
10. Botón para
11. Fijar ALARMA .2
12. Fijar ALARMA.1

## CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN – VOLVER

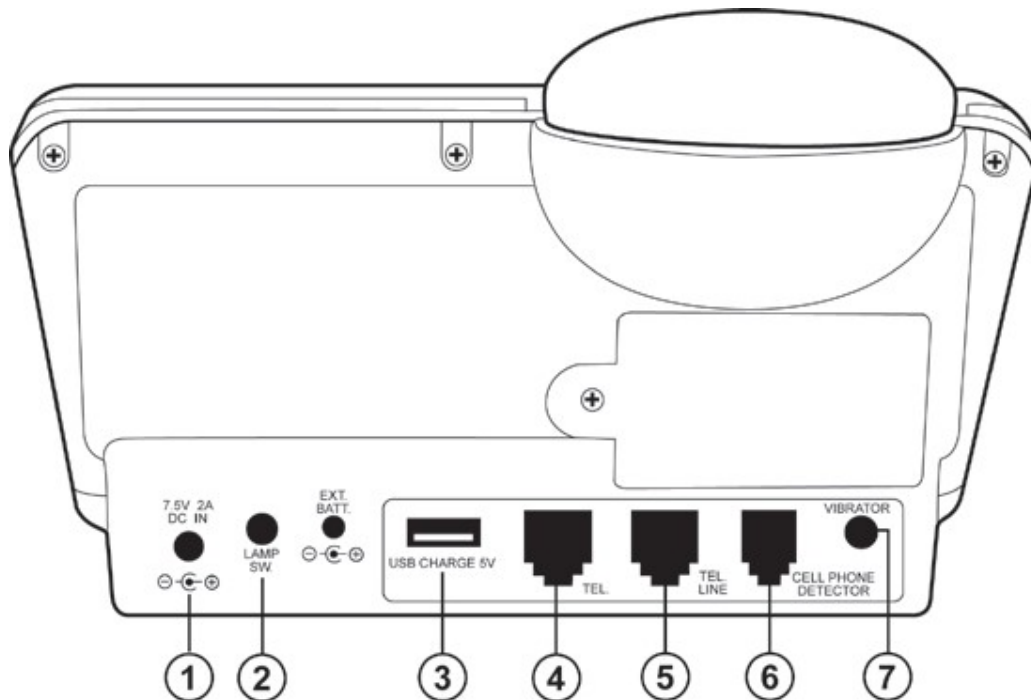

1. ALIMENTACIÓN DE ENTRADA 7.5V 2A DC IN
2. Lámpara del interruptor / UNIDAD PUENTE (Opcional)
3. Servidor de carga USB
4. TEL.
5. TEL. LÍNEA de
6. DETECTOR DE TELÉFONO CELULAR (Opcional)
7. VIBRADOR/AGITADOR DE CAMA


# CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL POR PRIMERA VEZ

## Qué incluye su HomeAware:

1. HomeAware™ - Unidad principal
2. Transmisor del timbre de la puerta
3. Cable conector del transmisor del timbre de la puerta al carillón
4. Vibrador/Agitador de cama
5. Cable de la línea telefónica

## Uso por primera vez, al sacar de su empaque

1. Retire todo el contenido de la caja. Asegúrese que los artículos 1 a 5 están disponibles, como se indica anteriormente.
2. Conecte la fuente de alimentación (ver diagrama siguiente 7.5V 2A DC IN). Observe la codificación de color correcta en la parte posterior de la unidad y en la parte posterior de la fuente de alimentación. Nota: Si se utiliza un receptor remoto la unidad principal y el receptor remoto tendrán diferentes códigos de color.

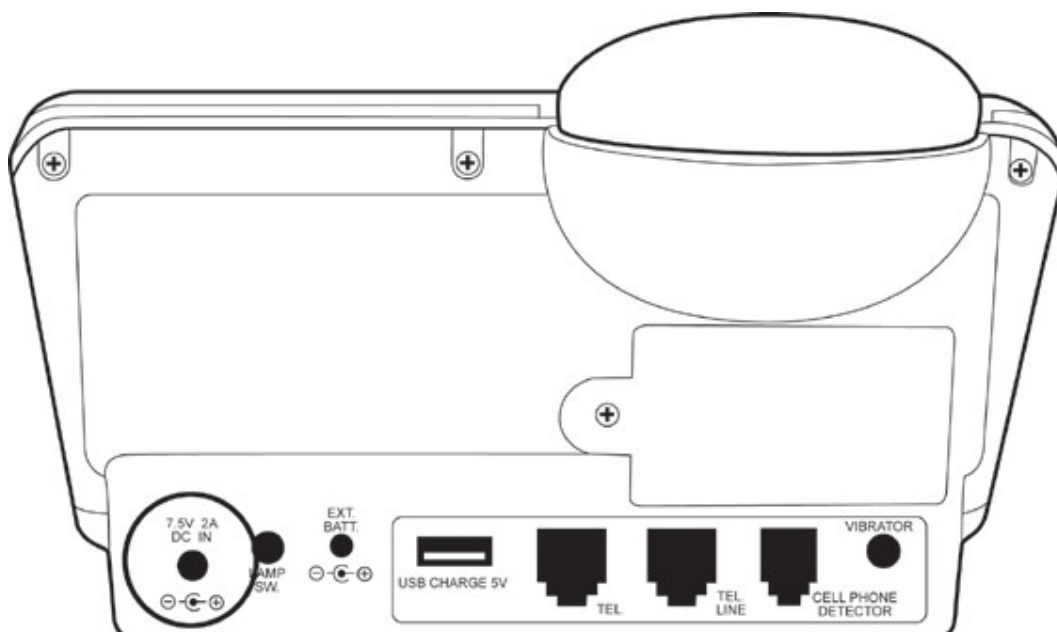

## PARA EMPEZAR AJUSTES DE HORA Y ALARMA

### Fijación de la hora del día

1. Pulse el botón **Configurar Hora (Time Set)** Aparecen puntos parpadeantes en la pantalla lo que indica que el modo de ajuste de tiempo ha sido activado.
4. Pulse los botones **Hora (Hour)** hacia arriba o hacia abajo y los botones de **Minuto (Minute)** hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora deseada. El indicador PM se encuentra en la parte superior izquierda (ver diagrama en la página siguiente).
5. Pulse el botón **INGRESAR (ENTER)** cuando haya finalizado de ajustar el tiempo.
  - Los puntos mostrados dejarán de parpadear para indicar que la hora ha sido fijada

### Ajuste de horas de alarma - Existen dos alarmas **AL.1** y **AL.2**.

#### Ajuste de la alarma 1

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **Fijación AL.1 (AL 1 Set)**. Aparecerá en la pantalla parpadeo de puntos rojos los cuales indican que se ha activado el modo de ajuste de la alarma.
2. Pulse los botones **Hora (Hour)** hacia arriba o hacia abajo y los botones de flecha **Minuto (Minute)** para fijar la hora de alarma deseada.
3. Pulse el botón **INGRESAR (ENTER)** cuando haya finalizado, un LED de luz roja aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla indicando la que se ha fijado la alarma 1 (ver diagrama de la página siguiente).

#### Ajuste de la alarma 2

Siga los mismos pasos para la **AL.1** anterior para fijar la **AL.2**. La **AL.2** tendrá su propia luz indicadora también a la izquierda como **AL2**.

## AJUSTES DE HORA Y ALARMA Continuación

### Cómo apagar la alarma

Para desactivar la alarma AL.1 o AL.2 pulse **Apagar Alarma (Alarm Off)** o el botón **REPOSO (SNOOZE)** (ver la fijación de **REPOSO (SNOOZE)** en la página siguiente).

Luces indicadoras de alarma con LED rojo



# REPOSO (SNOOZE) Y DURACIÓN DE LA ALARMA

## Ajuste de la Duración de la Alarma

La duración de la alarma le permitirá seleccionar la cantidad de tiempo que sonará la alarma (desde 5 minutos hasta 30 minutos).

4. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
5. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ** aparecerá en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**, aparecerá en pantalla la palabra **A TIEMPO (ONTIME)**, pulse **Ingresar (Enter)**.
6. Pulse el botón de **Tono** para ajustar la duración de la alarma deseada (desde 5 min hasta 30 min) y pulse **Ingresar (Enter)** para completar el ajuste de duración de la alarma.

## Fijación de la duración del reposo (Snooze)

La repetición de la alarma (reposo Snooze) le permite seleccionar la cantidad de tiempo que la repetición de la alarma del despertador se ejecutará (desde 5 minutos hasta 30 minutos).

4. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
5. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ** se le aparecerá en la pantalla pulse **Ingresar (Enter)** y la palabra **A TIEMPO (ONTIME)** se mostrará en la pantalla
6. Pulse el botón de **Tono** hasta que aparezca la palabra **REPOSO (SNOOZE)**, pulse **Ingresar (Enter)** La duración de la alarma por defecto es de 10 minutos si este es su repetición deseada, pulse **Ingresar (Enter)**. Si desea una duración más corta o más larga de repetición (desde 5 minutos hasta 30 minutos), pulse el botón para cambiar el **Tono** hasta que se muestre la duración de repetición deseada y pulse **Ingresar (Enter)**.



## **AJUSTES DE ALARMA DEL FLASH, AUDIO Y VIBRADORES**

### **Alarma 1 - Ajuste de las opciones de Flash de la alarma**

7. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
8. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ (CLOCK)** se muestra en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
9. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **ALARM1** se muestre en la pantalla.
10. Pulse **Ingresar (Enter)** y la palabra **FLASH** se mostrará en la pantalla.
11. Pulse **Ingresar (Enter)** y la palabra **ON** se mostrará en la pantalla.
12. Pulse el botón **Tono** para alternar entre **ON y OFF**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo a su selección.

### **Alarma 1 - Ajuste de las opciones de Audio de la alarma**

7. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
8. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ (CLOCK)** se muestra en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
9. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **ALARM1** se muestre en la pantalla.
10. Pulse **Ingresar (Enter)** y la palabra **FLASH** se mostrará en la pantalla.
11. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **AUDIO** se mostrará en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
12. Pulse el botón **Tono** para alternar entre **ON y OFF**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo a su selección.

## **ALARMA CON FLASH, AUDIO Y VIBRADOR CONFIGURACIÓN Continuación**

### **Alarma 1 - Configuración de las opciones del vibrador de la alarma**

8. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
9. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ (CLOCK)** aparecerá en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
10. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **ALARM1** se muestre en la pantalla.
11. Pulse **Ingresar (Enter)** y la palabra **FLASH** se mostrará en la pantalla.
12. Pulse el botón de **Tono** hasta que aparezca la palabra **VIBR** en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
13. Pulse el botón de **Tono** para alternar entre **ON y OFF**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo con su selección.
14. Mientras esté en el modo de configurar, los indicadores de alarma en el lado derecho se iluminarán mostrando las opciones de alerta elegidos (sonido, flash, y VIB).

### **Alarma 2 - Configuración de las opciones de alarma**

Siga los mismos pasos anteriores cuando fije la **ALARM2**.

### **Modo de prueba (Probando el Flash, audio, vibrador y la lámpara)**

3. **Pulse simultáneamente los botones de Ingresar (Enter) y Hacia Atrás (Back)**, la palabra **TEST (Prueba)** se mostrará en la pantalla. Se activarán el audio, vibrador, luz estroboscópica y el flash de la lámpara, de manera que usted puede estar seguro de que las tres alertas estén trabajando.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón de **REPOSO (SNOOZE)** durante 2 segundos para completar el modo de prueba.

## MODO DE 12 O 24 HORAS Y AJUSTE DE VOLUMEN/TONO

### Seleccionar el formato de 12 o 24 horas

5. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
6. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ (CLOCK)** se muestra en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
7. Pulse el botón **Tono** hasta que la pantalla muestre **12 /.24**, pulse **Ingresar (Enter)**.
8. Pulse el botón **Tono** para cambiar entre **12 HR** y **24 HR**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo a su selección.

### Volumen del parlante y Ajuste del Tono

1. Pulse el **volumen** hacia arriba y el botón de **Hora (Hour)** hacia abajo para seleccionar el nivel de volumen preferido. Hay 8 niveles de volumen y un nivel OFF para apagar completamente el sonido.
2. Pulse los botones de **Tono** hacia arriba y el **Minuto** hacia abajo para seleccionar el nivel de tono preferido. Hay 15 tonos diferentes para elegir.

## **CONFIGURACIÓN DEL REGULADOR AUTOMÁTICO DE INTENSIDAD Y ALERTAS**

### **Pantalla automática del regulador de intensidad (Dimmer)**

El HomeAware™ tiene un regulador automático de intensidad incluido. Se atenuará automáticamente cuando la habitación se oscurece. El regulador automático también se puede apagar y la pantalla permanecerá brillante incluso cuando la habitación se oscurece.

### **Desactivación de la atenuación automática**

5. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
6. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ** se mostrará en la pantalla.
7. Pulse el botón de **Tono** hasta que aparezca la palabra **DIM** en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
8. Pulse el botón de **Tono** para alternar entre **ON y OFF**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo con su selección.

### **Opción de Alertas (Número de alertas)**

El HomeAware™ posee diferentes opciones de alerta que le permiten al usuario elegir la cantidad de veces que sonará una alerta 3, 6 ó 9 veces.

### **Opción de configuración de las Alertas**

4. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
5. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **ALERTAS** se muestre en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
6. Pulse el botón de **Tono** para cambiar entre **3, 6, o 9**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo con su selección.

## CONFIGURACIÓN Y REMOCIÓN DE IDIOMA UN DISPOSITIVO VINCULADO

### Idioma

El HomeAware™ puede ser configurado para mostrar tres idiomas, Inglés, español o francés.

### Configuración de preferencia del Idioma

5. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
6. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ** se mostrará en la pantalla.
7. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **LANG** se muestre en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
8. Pulse el botón de **Tono** para cambiar entre **ENG, ESP** o **FRA**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo con su selección.

### Eliminación de un dispositivo vinculado


Cuando un dispositivo vinculado debe ser eliminado (reemplazando un dispositivo existente por uno nuevo o debido a la pérdida de un dispositivo)

5. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
6. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ** se mostrará en la pantalla.
7. Pulse el botón de **Tono** hasta que aparezca la palabra **ELIMINAR (REMOVE)** en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
8. Pulse el botón de **Tono** para cambiar entre los dispositivos, pulse **Ingresar (Enter)** acorde con su elección.

# BATERÍA DE RESPALDO

## Batería de respaldo

1. Para configurar la batería de respaldo desconecta la unidad principal de la fuente de alimentación 120v.
2. Instale 5 nuevas baterías alcalinas AA en el compartimiento de la batería situado en la parte inferior de la unidad principal.
3. La pantalla LED se atenúa cuando el dispositivo trabaja solamente con las baterías de respaldo. Ante cualquier alerta como timbre o el teléfono, la pantalla estará en su máximo brillo. Después de cualquier alerta de la pantalla la misma se atenuará de nuevo para ayudar a preservar energía de la batería.

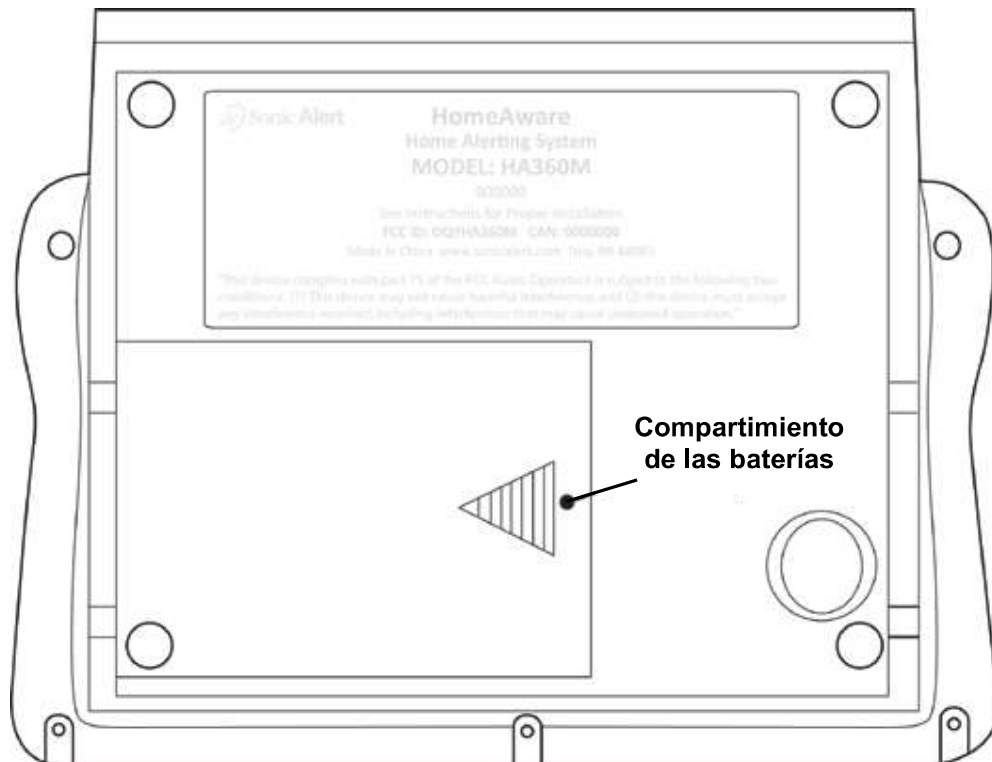


## CARGA A TRAVÉS DEL PUERTO USB

### Carga a través del puerto USB

El HomeAware está equipado con un puerto USB conveniente para cargar localizado en el panel trasero el cual permite cargar una gran variedad de marcas de teléfonos móviles, reproductores portátiles de música, y otros dispositivos manuales equipados con cables de carga vía USB. Con excepción de Tablets.

Para cargar su dispositivo, conecte el cable USB que le fuera suministrado con su dispositivo al puerto de carga USB localizado en el parte posterior de la unidad principal. Observe el indicador de carga en su dispositivo para confirmar que se esté cargando. Nota: El tiempo de carga varía acorde con la carga que su dispositivo requiere. Por lo tanto algunos dispositivos tardan más en recargarse que otros.

\* El cargador USB HomeAware™ maneja sólo dispositivos de 5 voltios. No cargará un iPad® o un tablet.

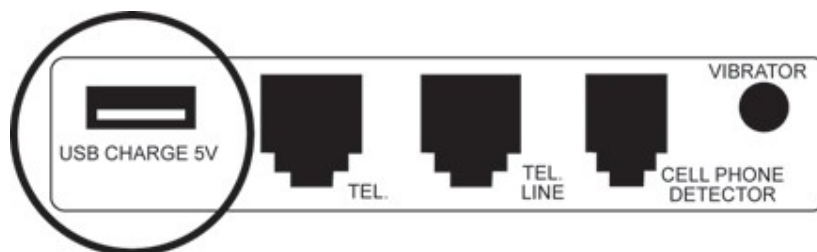

## **VIBRADOR / AGITADOR DE CAMA**

### **Vibrador/Agitador de cama**

Su HomeAware™ viene con un potente agitador/vibrador de cama. Este potente agitador/vibrador de cama es más eficaz cuando se coloca entre el colchón y el somier (colchón de muelles) o debajo de una almohada. Esta característica es una gran manera de poderse despertar, ya que no requiere un fuerte sonido que pudiera despertar a los demás. Este agitador de cama puede ser programado para sacudirse junto con la alerta del despertador o para todas las alertas que incluyen llanto de un bebé, timbre, el humo/CO y alertas telefónicas.

Para configurar el vibrador/agitador de cama sólo tiene que conectar el vibrador en la parte posterior del HomeAware™ donde dice vibrador.

## **ALERTA DE HUMO / CO**

HomeAware™ le alertará sobre los sonidos producidos por los detectores de humo y CO ya instalados en su hogar.

Detección de los diferentes sonidos de alerta La unidad principal detecta sonidos fuertes y le alertará sobre la fuente de ese sonido. Si detecta un sonido fuerte de un detector de humo que cumple con el estándar T3 usado para los DETECTORES DE HUMO, "SMOKE" se desplazará en la pantalla de la unidad principal de HomeAware™.

(El estándar T3 está activado durante 0,5 segundos, apagado durante 0,5 segundos, repetido 3 veces y seguido de 1,5 segundos de silencio, según se define en el código NFPA 72.)

Si detecta un sonido fuerte de un DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) que cumple con el estándar T4, "CO" se desplazará en la pantalla de la unidad principal HomeAware™.

(El estándar T4 se enciende durante 0,1 segundos, se apaga durante 0,1 segundos, se repite 4 veces y se sigue 5 segundos de silencio, según se define en el código NFPA 720.)

Para todos los otros sonidos Si se detecta un sonido fuerte que NO coincide con el estándar T3 o T4, entonces "ALERT" se desplazará por la unidad principal de HomeAware™ en un patrón alto y repetitivo.



## ALERTA TELEFÓNICA PARA TELÉFONOS DE LÍNEA FIJA

El HomeAware™ tiene la capacidad de alertar a un teléfono fijo estándar. Siga los pasos a continuación para instalar un teléfono al HomeAware™.

1. Coloque la unidad principal del HomeAware™ cerca de una toma de pared RJ11 de un teléfono estándar. Si el cable telefónico proporcionado no es lo suficientemente largo para llegar hasta el HomeAware™ tendrá varias opciones: o bien mover el HomeAware™ más cerca de la toma de entrada o comprar un cable de línea más largo.
2. Conecte el cable de la línea telefónica a la toma de pared RJ11.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea de teléfono en la parte posterior del HomeAware™ donde dice **TEL LINE**. Ahora está listo para recibir alertas de todas las llamadas telefónicas que provienen de este teléfono.
4. También puede utilizar el HomeAware™ para agregar un teléfono a su toma de entrada en la parte posterior de la unidad. Simplemente conecte el teléfono en la parte posterior donde dice **TEL**. Su teléfono fijo ya está listo para hacer y recibir llamadas

## ACCESORIOS OPCIONALES

- El receptor remoto Deluxe de alcance extendido de HomeAware™ provee una notificación con una potente luz intermitente estroboscópica de xenón, y el primero de su tipo en presentar la posibilidad de desplazarse en la pantalla por el texto.
- El Receptor Básico HomeAware™ es una solución más rentable para aquellos con un presupuesto limitado.
- Transmisor de monitoreo Baby Cry
- Llamadas de un Smartphone y altavoces personales de alertas mediante empuje recibidas del HomeAware™. Su aplicación para Smartphone proporcionará alertas desde su sistema HomeAware™ a su Smartphone (Bebé llorando, Humo, Llamada, Puerta, etc.).
- El SonicBridge™ le permite al HomeAware™ enlazar con cualquier receptor tradicional a distancia Sonic Alert, mientras que también proporciona una luz intermitente personal.

## **CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

### **PARTE 68 DE LA INFORMACIÓN DE LAS REGLAS FCC**

El equipo HA360MVSb cumple con la Parte 68 de las Reglas FCC. Usted debe, previa solicitud, facilitar el número de registro FCC y el REN a su compañía telefónica local. Ambos números se muestran en la etiqueta de su equipo HA360MVSb.

### **PARTE 15 DE LA INFORMACIÓN DE LAS REGLAS FCC**

El equipo HA360MVSb cumple con la parte 15 de las normas FCC y con las normas RSS-210 de la Industria del Canadá. La operación de éste dispositivo está sujeta a dos condiciones: 1) el dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección responsable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes medidas:

- v. Reorientar o reubicar la antena receptora.
- vi. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- vii. Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- viii. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier modificación no está aprobada expresamente por el fabricante y podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo bajo las reglas de la FCC.

## DATOS GENERALES

Adaptador de potencia con certificación UL AC100-240V~, 50/60Hz

Consumo de potencia: Salida del adaptador: DC7.5V 2A

 <p>Una indicación de rayo y flecha dentro del triángulo equivalen a símbolo de advertencia acerca de voltaje peligroso localizado dentro del producto.</p>	<p><b>PRECAUCIÓN:</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO DESMONTE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) DEL PRODUCTO NO CONTIENE PARTES INTERNAS QUE PUEDAN REQUERIR DE SERVICIO. REFIERA EL SERVICIO A SU REPRESENTANTE SONIC ALERT.</p>	 <p>El símbolo de exclamación dentro del triángulo es una señal de advertencia acerca de las instrucciones importantes que acompañan al producto.</p>
--	--	--


**ADVERTENCIA:** PARA PREVENIR DAÑOS POR FUEGO O POR CHOQUE ELÉCTRICO, ÉSTE APARATO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

***La función normal del producto puede llegar a perturbarse debido a una fuerte interferencia electromagnética. Si es así, simplemente reinicie el producto para que reanude su funcionamiento normal, siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que la función no se reanuda, por favor, utilice el producto en otra ubicación.***

## DATOS GENERALES Continuación

- Se debe prestar especial atención a los aspectos ambientales al botar las baterías.



-  Éste símbolo indica recolección separada de basura para los equipos eléctricos y electrónicos.

### GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO DE SONIC ALERT

El HomeAware™ HA360MVSBS está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Dentro de este período, Sonic Alert reparará o reemplazará, a su criterio, el HA360MVSBS sin cargo por componentes o trabajo.

Simplemente contacte nuestro departamento de servicio al cliente para obtener un número de autorización de devolución (RA) y las instrucciones de cómo proceder a enviar su producto. Llame al 1-888-864-2446 o envíe correo electrónico a [RMA@sonicalert.info](mailto:RMA@sonicalert.info). Deberá tener la copia del recibo para procesar la autorización de devolución.

**Centro de Garantía Sonic Alert**  
**1081 West Innovation Dr. Kearney, MO 64060, USA.**



**Hecho en China**  
**Sonic Alert, Troy, MI 48083**  
**www.SonicAlert.com - 1-888-864-2446**